



Dental Implant Unit

Implant Air

Precise Reliable Simple





کیفیت بالاترین تجربه نهایی


ایمپلنتولوژی دندان یک موضوع بسیار پر تقاضا است
واحد ایمپلنت دندان هوشمند ایمپلنت ایر بطور کامل
از نظر سخت افزاری و نرم افزاری ارتقا یافته است تا
دقت جراحی ایمپلنت را بهبود بخشد و همچنین عملیات
را کارآمد تر و کوتاه تر می کند ارائه یک تجربه عالی
برای بیماران و پزشکان

Auto torque calibration before each startup

Calibrating ...

ایمپلنت ایر دارای کالیبراسیون خودکار راه اندازی گشتاور TSAC است که تضمین می کند که دستگاه هر بار که روشن می شود خود را برای دقت بیشتر کالیبره می کند. این کار باعث حذف عملیات دستی می شود. با استفاده از موتور سوئیسی، خروجی دقیق تر و راحت تر ارائه می دهد.

گشتاور خروجی پیوسته، دقیق و قابل اطمینان
گشتاور در زمان واقعی نمایش داده می شود. علاوه، هنگامی که
گشتاور خروجی در طول کاشت به مقدار از پیش تعیین شده برسد
گشتاور خروجی با مقدار از پیش تعیین شده ادامه خواهد یافت.
اطمینان از این که گشتاور در عملیات کاشت ایمپلنت با دقت بالا
به هدف از پیش تعیین شده می رسد.

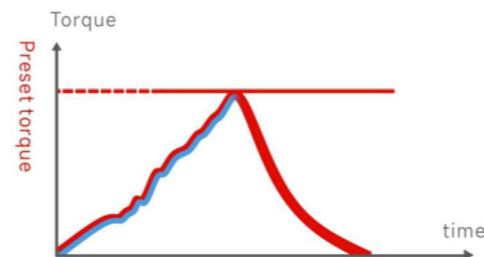

Torque output maintained

Torque output unmaintained

هنگامی که گشتاور به مقدار از پیش تعیین شده رسید
بدون توقف خودکار به خروجی خود ادامه می دهد و از
گشتاور ناکافی خروجی جلوگیری می کند.



Speed range
300 - 42000rpm



Torque range
(20:1)5N·cm- 80N·cm



Max water volume
135ml/min



Motor size
φ23.4mmxL91mm



Motor weight
140g



• اوج ارزشگر نمایشگر آسان و چشمگیر

در عملیات کاشت ایمپلنت رابط کاربری با مقدار پیک برای ثبت لحظه ای حداکثر گشتاور خروجی هر عمل تنظیم شده است که برای پزشکان راحت است تا بالاترین گشتاور عملیات کاشت را انجام دهند.

ثبات ایمپلنت را تایید کنید و واحل اضافی را کاهش دهید

Torque	N·cm
30	Peak 30
-	+



• بلبرینگ آلمانی پایدار و با دوام

با دقت بالا، زاویه مخالف گستره خروجی 20M که می تواند خروجی پایدار را بدون توجه به موقعیت پیچیده مانند سرعت بالا یا پایین تضمین کند بلبرینگ آلمانی به عملکرد پایدار و عمر طولانی تر زاویه مخالف کمک می کند



• موتور سوئیسی قدرتمند و نیرومند

حداکثر گشتاور خروجی را تضمین می کند برای برآوردن نیازهای مختلف جراحی موتور LED کل جراحی ایمپلنت را به تصویر می کشد که آن را کارآمد تر می کند





پمپ پرستالتیک فوق اعاده بی صدا، استفاده ساده
طراحی ضد آب سر پمپ به طور موثر که از بروز فرسودگی صدا جلوگیری می کند
سیستم تامین آب پمپ پرستالتیک فوق العاده بی صدا
اتصال آسان قابل تطبیق با لوله ب خوراکی یکبار مصرف برای جلوگیری از عفونت



پدال پا چند منظوره رایگان و قابل انعطاف
کنترل حجم آب - تغییر برنامه
تغییر در چرخش رو به جلو و برعکس
کنترل سرعت می تواند همه این ها را تکمیل کند به وسیله پدال پا
چند منظوره عملیات اسپتیک واقعی
دست هایت را آزاد کن

طراحی فشرده، رابط کاربری ساده
بدنه عمودی، طراحی فشرده، صرفه جویی در فضای بیشتر
صفحه نمایش لمسی رنگی LCD پنج اینچی، پنج برنامه اصلی از پیش تعیین شده
ذخیره خودکار پارامترها پس از هر عملیات، عملیات ساده تر، تجربه کاربری ساده و راحت را به ارمغان می آورد.



نگه داری راحت بدون خستگی

زاویه مخالف با طراحی ارگونومیک برای جلوگیری از خستگی در

حین کار وزن مناسب با موتور برای اطمینان از چسبندگی متعادل

ویژگی های کامل

سازگار با تمام هندپیس های رابط ضد زاویه نوع E و انواع

لیست های سرعت بر خلاف زوایای متناسب با نیاز های جراحی مختلف

